


KBTバルーン径表

Kissing Balloon Technique

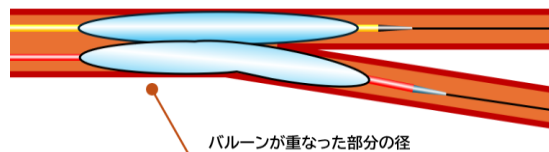

単位(mm)

バルーン径 ① \ ② バルーン径	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
1.25	1.77	1.95	2.15	2.36	2.57	2.80	3.02	3.25	3.48	3.72	3.95	4.19
1.50	1.95	2.12	2.30	2.50	2.70	2.92	3.13	3.35	3.58	3.81	4.04	4.27
1.75	2.15	2.30	2.47	2.66	2.85	3.05	3.26	3.47	3.69	3.91	4.14	4.37
2.00	2.36	2.50	2.66	2.83	3.01	3.20	3.40	3.61	3.82	4.03	4.25	4.47
2.25	2.57	2.70	2.85	3.01	3.18	3.36	3.55	3.75	3.95	4.16	4.37	4.59
2.50	2.80	2.92	3.05	3.20	3.36	3.54	3.72	3.91	4.10	4.30	4.51	4.72
2.75	3.02	3.13	3.26	3.40	3.55	3.72	3.89	4.07	4.26	4.45	4.65	4.85
3.00	3.25	3.35	3.47	3.61	3.75	3.91	4.07	4.24	4.42	4.61	4.80	5.00
3.25	3.48	3.58	3.69	3.82	3.95	4.10	4.26	4.42	4.60	4.78	4.96	5.15
3.50	3.72	3.81	3.91	4.03	4.16	4.30	4.45	4.61	4.78	4.95	5.13	5.32
3.75	3.95	4.04	4.14	4.25	4.37	4.51	4.65	4.80	4.96	5.13	5.30	5.48
4.00	4.19	4.27	4.37	4.47	4.59	4.72	4.85	5.00	5.15	5.32	5.48	5.66
4.25	4.43	4.51	4.60	4.70	4.81	4.93	5.06	5.20	5.35	5.51	5.67	5.84
4.50	4.67	4.74	4.83	4.92	5.03	5.15	5.27	5.41	5.55	5.70	5.86	6.02
5.00	5.15	5.22	5.30	5.39	5.48	5.59	5.71	5.83	5.96	6.10	6.25	6.40

※エクセルの計算式 =SQRT((バルーン径①のセル^2+バルーン径②のセル^2))

※通常の計算式2.00mmと2.50mmのバルーンの場合 $=\sqrt{(2.00^2+2.50^2)}=3.20$

※簡易計算式2.00mmと2.50mmのバルーンの場合 $=(2.00+2.50)\times 0.7=3.15$

デバイス情報はカンペの獣
<https://www.kanpenokemono.net>

